

Fuji フェイスシールドメガネ型

超軽量で飛沫感染をしっかりとガード!

✓ 病院、介護施設、接客業等での感染予防対策に!

1. 両面曇り止め加工。
2. メガネの上から着用可能。
3. 違和感の少ない透明感。
4. 男女兼用フリーサイズ。
5. 油跳ね、埃等からも守ります。



飛沫感染
防止


マスク
と組合せて
Wガード

長時間
使用可能


繰り返し
使用可能

簡単組み立て方法


①側面にあるクリッパーを指でつまみ上げる。

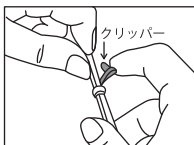

②矢印の方向にシートを入れ込み、本体の穴とシートの穴の位置を合わせ手で固定する。

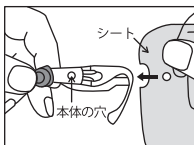

③クリッパーの突起部分を本体とシートの穴に奥まで差し込んで完成。

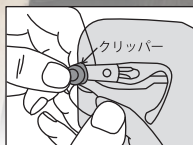

商品名：フジフェイスシールドメガネ型
入数：100箱(1セット×100小箱)
品番：959900
JAN：4942015095991
ITF：14942015095998

素材：シート/PET メガネフレーム/PC
商品サイズ：シート/240×220mm フレーム/140mm
内箱サイズ：60×60×220mm 重さ 57g (±5%)
外箱サイズ：465×645×320mm 重さ 7kg (±5%)
生産国：中国



セット内容：シート1枚・メガネフレーム1個
シートの保護フィルムを剥がしてからご使用下さい。